

KERN[®]

KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1
D-72336 Balingen
E-mail: info@kern-sohn.com

Tel. +49-[0]7433-9933-0
Fax: +49-[0]7433-9933-149
Internet: www.kern-sohn.com

Monteringsinstruktion Satsen huvud- och fotstöd

KERN MBC-A05

Version 1.0
04/2014
SWE



MBC-A05-IA-swe-1410



KERN MBC-A05

Version 1.0 04/2014

Monteringsinstruktion Satsen huvud- och fotstöd

Innehållsförteckning

1	Tekniska data	3
2	Leveransomfattning.....	3
3	Beskrivning	3
4	Montering	4
5	Rengöring/desinficering.....	4

1 Tekniska data

KERN	MBC-A05
Mått [mm] komplett monterad sats	600x280x128
Nettovikt [kg]	350

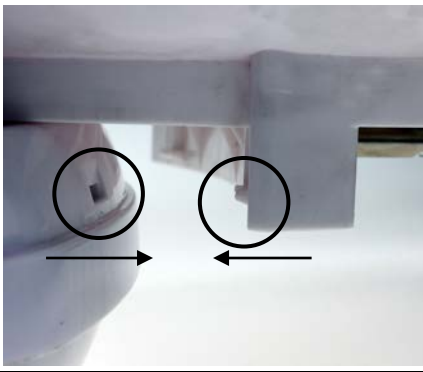

2 Leveransomfattning

- 1 vågplatta med huvud- och fotstöd
- Monteringsinstruktion

3 Beskrivning

KERN MBCA05 huvud- och fotstöd utgör sidobegränsningar av vågplattan som ökar en babys säkerhet.

4 Montering

	<p>Montera satsen huvud- och fotstöd på vågen enligt bild.</p>
	<p>Satsen huvud- och fotstöd är färdigmonterad.</p>

5 Rengöring/desinficering

Rengör vågskålen och höljet endast med ett hushållsrengöringsmedel eller ett desinficeringsmedel som kan köpas i handeln. Följ tillverkarens anvisningar. Använd inga polerande eller aggressiva rengöringsmedel som sprit, bensin o dyl. eftersom dessa kan skada den högkvalitativa ytan.

För att undvika korskontaminering (svampinfektioner, ...) rengör vågplattan regelbundet. Rekommendation: rengör vågen efter varje vägning som kan innebära potentiell kontaminering (ex. vägning med direkt hudkontakt).



Bespruta inte apparaten med desinficeringsmedel.

Desinficeringsmedlet kan tränga in i vågen.

Vi rekommenderar att desinficering sker genom våttorkning av ytan.

Avlägsna omedelbart alla föroreningar.