



KERN & Sohn GmbH

Ziegelei 1

D-72336 Balingen

E-Mail: info@kern-sohn.com

Tel.: +49-[0]7433-9933-0

Faks: +49-[0]7433-9933-149

Internet: www.kern-sohn.com

Instrukcja instalacyjna Interfejs

KERN KFN-A01

Wersja 1.1

02/2013

PL

KFN-A01-IA-pl-1311



KERN KFN-A01


Wersja 1.1 02/2013

Instrukcja instalacyjna

Podłączanie kabla interfejsu KFN-A01 do terminalu KFN-TM



Usunąć śruby znajdujące się z tyłu terminalu

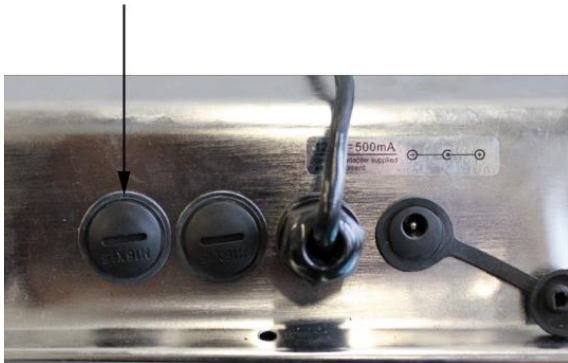


Zdjąć pokrywę




Przeciagnąć kabel interfejsu przez otwór w terminale



Przykręcić kabel do terminalu

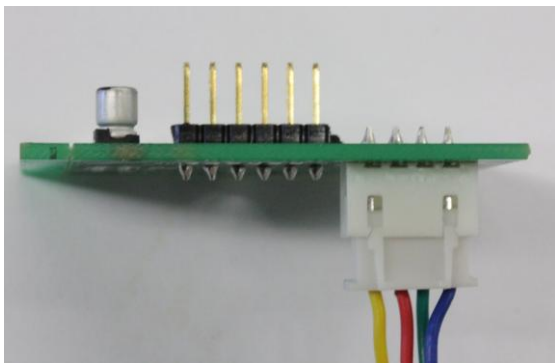



Włożyć kabel w płytkę RS-232

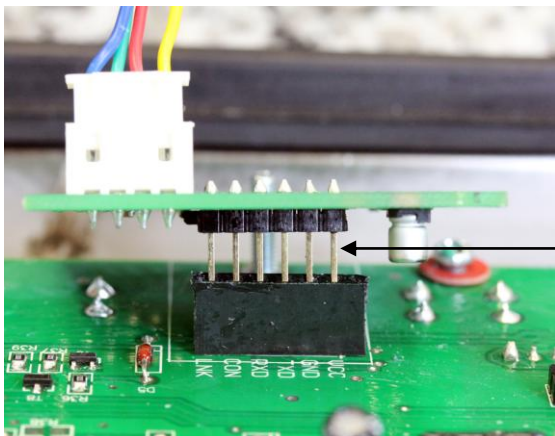


Płytkę RS-232 wsadzić w płytkę główną

Uważać na rozmieszczenie wyprowadzeń!

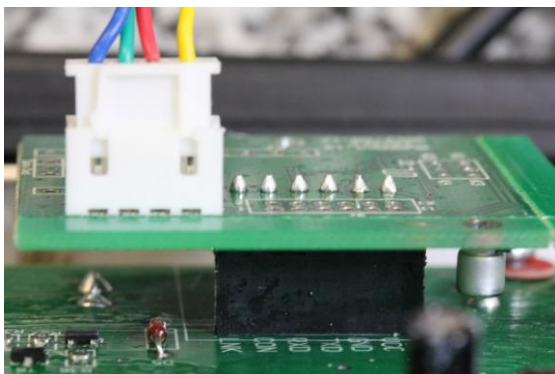

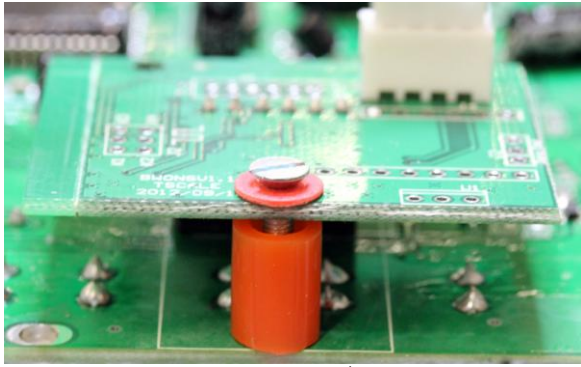

Wkręcić śrubę z przekładką

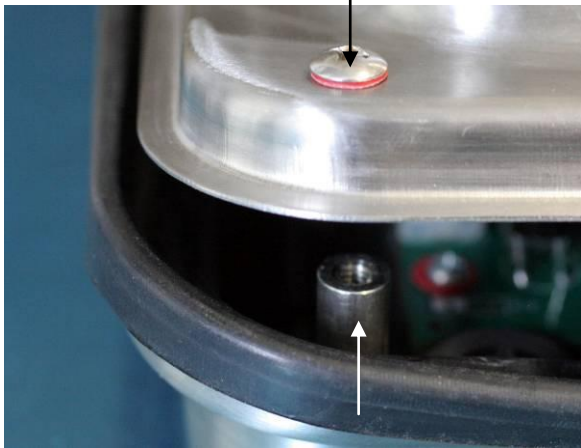

Ponownie wkręcić śruby z tyłu terminalu



Kabel (1,5) m podłączyć do drukarki /PC i zablokować